

Guide pour les escarres reliées aux dispositifs médicaux - Mepilex® Lite

Mepilex® Lite protège la peau et absorbe l'humidité mais offre aussi à la peau fragile une protection attestée contre les forces externes, dont les frictions et pressions exercées par l'usage fréquent de dispositifs médicaux^{1,2}.


Clause de non-responsabilité : l'usage prophylactique de pansements pour réduire le risque de plaies de pression causées par des dispositifs médicaux est bien documenté, mais leur utilisation sous des EPI n'a pas été testée en termes de maintenance de l'étanchéité ou d'impact potentiel sur une transmission virale par Mölnlycke ni par d'autres dont Mölnlycke aurait connaissance.

- Mepilex Lite peut être coupé sur mesure
- Pour découper Mepilex Lite, laisser le film support en place
- Mepilex Lite adhère en douceur à la peau grâce à la technologie Safetac®³



Safetac
TECHNOLOGY

Ces illustrations présentent quelques exemples de zones à protéger sous des dispositifs médicaux




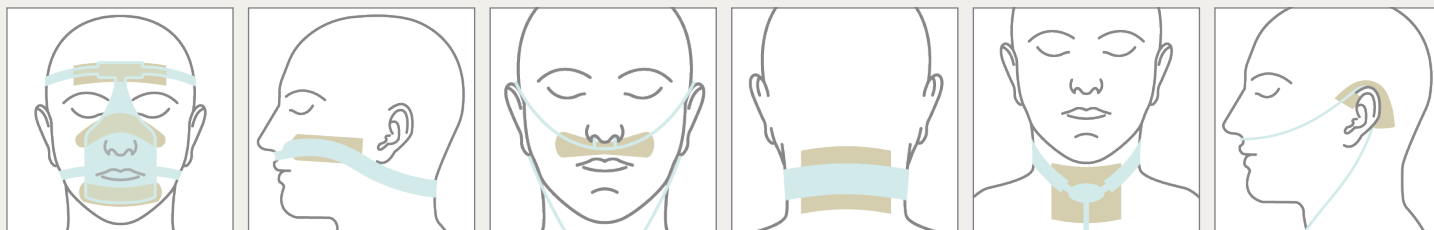


Mepilex® Lite


Mölnlycke®

Guide de découpe

Sélectionnez un pansement d'une taille correspondant à la zone à protéger et découpez-le pour l'adapter aux besoins/contours du patient ou à la forme du dispositif. Appliquez la face adhésive sur la peau.

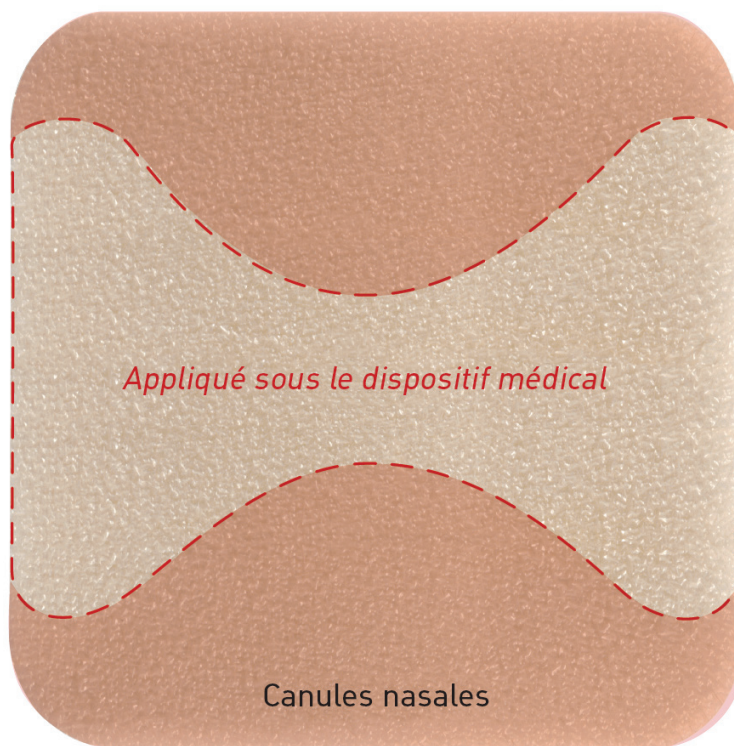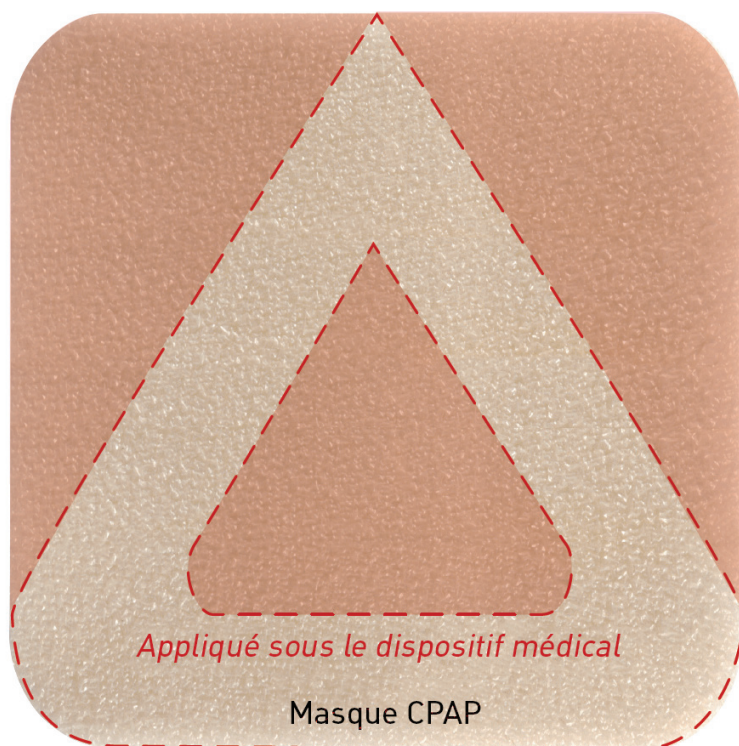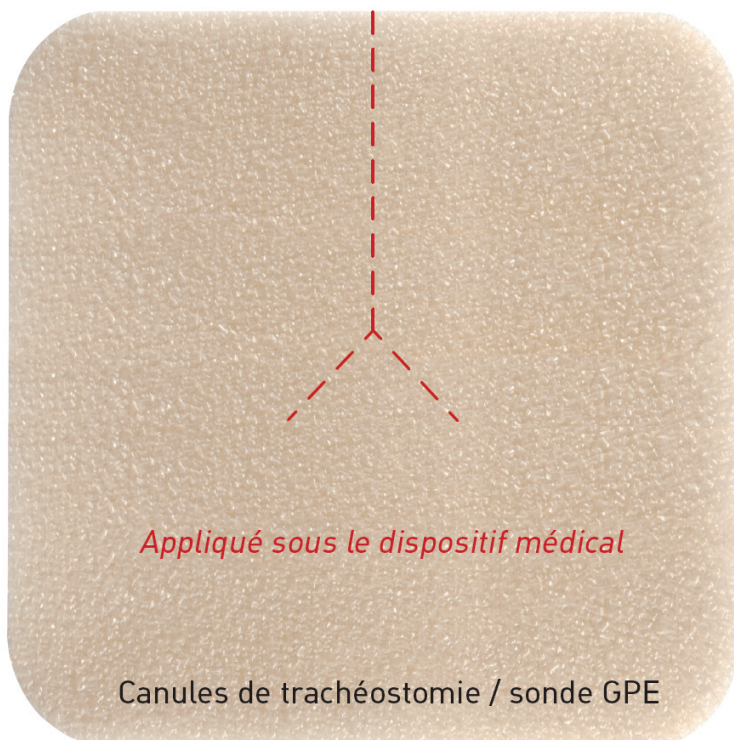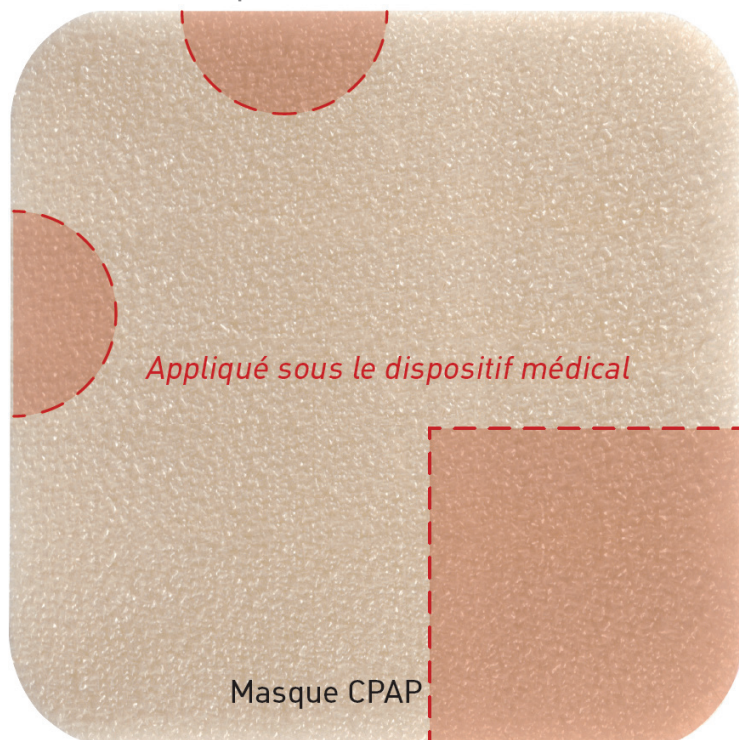

SafetaC
TECHNOLOGY

Clause de non-responsabilité : les informations fournies ici ne peuvent pas être interprétées comme une pratique médicale courante et ne remplacent pas le jugement médical indépendant d'un médecin traitant. Ces informations, y compris, mais sans s'y limiter, les suggestions concernant le temps de port du produit, la sélection d'un produit et les suggestions d'utilisation, sont basées sur des généralisations et ne tiennent pas compte des caractéristiques uniques de chaque plaie. Le médecin traitant de chaque patient demeure entièrement responsable de l'évaluation de la gravité de la plaie, du choix du traitement approprié et de la gestion de ce traitement de la plaie.

Références 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792-e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstationstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Les noms, logos et marques Mölnlycke, Mepilex et SafetaC sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
©2020 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. BFWC00062004


Mölnlycke[®]